

DAVIES® GOLD

elektrisches Dermatom System

Das Davies® Gold Dermatom System bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Der Duplex-Kopf ist mit den verfügbaren Reduzierplatten auf verschiedene Schnittbreiten einstellbar. Neben der Antriebsmöglichkeit über Micromotor und CM2 Steuerstation, kann der Dermatomkopf auch mit anderen Motorensystemen betrieben werden.



GD-103

CM2
Steuerstation

- Leicht und kompakt
- 7 Schnitttiefen und 3 Schnittbreiten einstellbar
- Duplex-Kopf, Micromotor und Steuerkabel autoklavierbar
- Konstante und präzise Schnittleistung
- Leistungsstarker Motor mit variabler Geschwindigkeit
- Wartungsfreundlich
- CE-Prüfsiegel

System - Spezifikation

Dermatom - Technische Daten

Schnittbreite (mm)	73
7-stufige Schnittstärke	0,08 - 0,38 mm
Leistungsgeschwindigkeiten (UpM)	2.000 - 15.000
Gewicht (kg)	0,32

Zubehör - optional

Reduzierplatten	Art.-Nr.
für Duplexkopf - Schnittbreite v. 73 - 48 mm	8540
für Duplexkopf - Schnittbreite v. 73 - 23 mm	8550

Micromotor und Steuerstation

Schnelles Aufsetzen des Dermatom-Kopfes auf den universellen Micromotor. Der Motor kann entweder über den Fußschalter oder direkt über die Steuerstation betätigt werden.


Steuerstation - Technische Daten

Eingangsspannung:	230 V / 50 Hz
Leistung:	130 VA
Maße (mm):	100 x 85 x 165
Gewicht (kg):	1,68/0,12 Steuerstation/Motor



Sterilisationsbehälter

Zur Aufbewahrung der System-Komponenten.
Autoklavierbar bei 134°C.

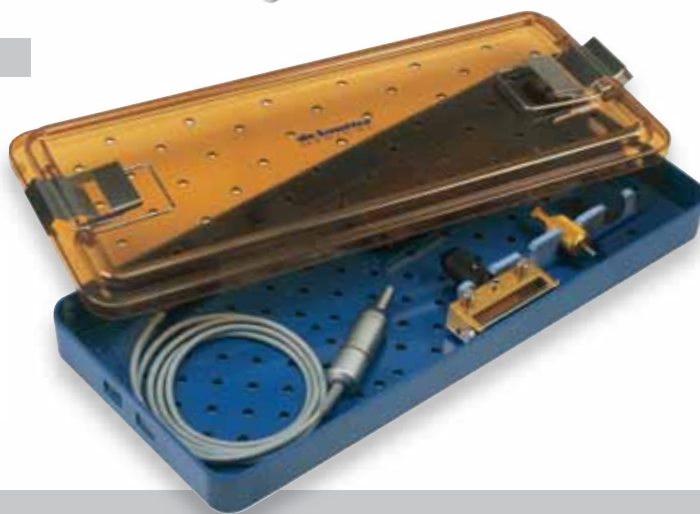

Bestell-Hinweis:

Duplex-System - 73 mm Schnittbreite

System-Komponenten	230V - Euro Stecker	230V - UK Stecker	120V - US Stecker
GD-103 Duplex-Kopf komplett	222994	222994	222994
CM2 Steuerstation und Fußpedal	1280994	1280884	1281004
Duplex-Klingen (Packung à 5 Stück)	S11-103	S11-103	S11-103
Sterilisationscontainer	8570	8570	8570
Komplettes System	GDA-103/230EU	GDA-103/230UK	GDA-103/120US

De Soutter Medical
Niederlassung Deutschland
Kladdenfloss
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Fax: +49 (0) 68 52-99 12 47
e-mail: de.soutter@t-online.de
web: www.de-soutter.com

De Soutter Medical
Niederlassung Österreich
Hofkirchnergasse 3/1/30
A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 676-96 71 770
Fax: +49 (0) 2243-21 656
e-mail: austria@de-soutter.com
web: www.de-soutter.com

de Soutter
MEDICAL