

dermadrive™

Dermatom System

GD-SERIE




GD DERMATOM SYSTEM

De Soutter Medical präsentiert in einer Neuentwicklung ein außergewöhnlich kompaktes und ergonomisches Dermatom System zur Spalthautentnahme. Eine gleichmäßige und nahezu vibrationsfreie Schnittführung ist jederzeit gewährleistet. Der Einsatz des Dermadrive Systems erfolgt in Verbindung mit der CM2 Steuerstation. Alternativ ist der Dermatomkopf mit den DE Soutter Motorensystemen EPV als Druckluft- bzw. ECV als Elektrische Variante über eine Schnellkupplung kombinierbar.



Die präzise Anpassung der Transplantatstärke erfolgt schlüssellos über eine Skalierung am Dermatomkopf. Einstellbare Schnittdicken zwischen 0.05mm bis zu 1.00mm jeweils im 0.1mm Abstand.

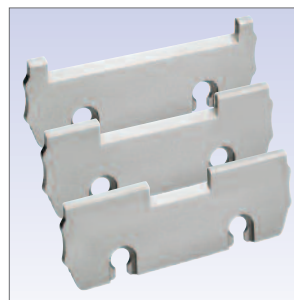

Die exakte Einstellung der Schnittbreiten 73mm, 48mm und 23mm wird mittels schnell austauschbaren Reduzierplatten ermöglicht.




Die Stericut Dermatomklingen sind beidseitig geschliffen und erlauben, auf Grund ihrer Schärfe, eine sehr dünne und präzise Spalthautentnahme. Die Packungsgröße beträgt 5 Stück per Box. Ein Klingenaustausch ist schnell und gefahrlos möglich.



SYSTEM SPEZIFIKATION

TECHNISCHE DATEN

	Schnittbreite	Schnittstärke	Leistungsgeschwindigkeit	Gewicht
	73 mm	von 0.05 bis 1.00 mm	von 2000 bis 15000 Upm	0.28 kg
	Der Dermatomkopf wird mit einer Standard Reduzierplatte in 73 mm Schnittbreite geliefert. Optionale Reduzierplatten : 48 mm Schnittbreite - Artikelnummer 17260 23 mm Schnittbreite - Artikelnummer 17340			

MICROMOTOR UND STEUERSTATION

Einfaches Konnektieren des Dermatomkopfes auf den Micromotor.
Die Geschwindigkeit ist an der CM2 Steuerstation variabel einstellbar.
Alternativ steht zur Bedienung ein Fußpedal zur Verfügung.



Steuerstation - Technische Daten

Eingangsspannung: 230/115/100V 50-60Hz
Leistung: 60VA
Maße: 181 x 101 x 119 mm
Gewicht: 1.79/0.12 kg
Steuerstation/Motor

STERILISATIONSBEHÄLTER

Zur Aufbewahrung der System-Komponenten.
Autoklavierbar bei 134°C.



BESTELL-HINWEIS

System-Komponenten	Bestellnummer
GD-113 Dermatomkopf	17200
CM2 Steuerstation, Micromotor, Fußpedal als Set	1292334
Dermatomklingen (Packung à 5 Stück)	S11-103
Sterilisationsbehälter	8570
Komplettes System	GDA-113/CM2

Versorgungskabel - 3 Meter lang

UK Bestellnummer 8290
Euro Bestellnummer 8300
US/Kanada Bestellnummer 8310
Australien Bestellnummer 8320
Neuseeland Bestellnummer 8320
Schweiz Bestellnummer 14700

**Für weitere Informationen zu den De Soutter Medical Motorinstrumenten
und Gipssägen, kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung.**

GROßBRITANIEN (INTERNATIONALER FIRMENSITZ)

De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road, Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000 Fax: +44 (0) 1296 634 033
Email: info@de-soutter.com

DEUTSCHLAND

De Soutter Medical Deutschland
Bahnhofstraße 4, D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46 Fax: +49 (0) 68 52-99 12 47
Email: deutschland@de-soutter.com

ÖSTERREICH

De Soutter Medical Austria
Zweigniederlassung Österreich, Dietrichsteingasse 10, A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 676 96 71 770 Fax: +43 (0) 2243 21 656
Email: austria@de-soutter.com

BELGIEN

De Soutter Medical Belgium
In De Bruel 30, 3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37 Fax: +32 (0) 89/70 12 19
Email: belgium@de-soutter.com

FRANKREICH

De Soutter Medical France
949 Avenue Parc des Expositions, 33260 La Teste de Buch
Tel: +33 (0) 5 56 54 89 36 Fax: +33 (0) 9 70 61 37 60
Email: france@de-soutter.com

AUSTRALIEN

De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam, Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441 Fax: +61 (0) 3 9702 4484
Email: australia@de-soutter.com

ITALIAN

De Soutter Medical Italia
Localita' Fornace SNC, 27022 Casorate Primo - PV
Tel: +39 (0) 2 9009 4098 Fax: +39 (0) 2 9009 2673
Email: italy@de-soutter.com

NIEDERLANDE

De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven 2X, 3433PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480 Fax: +31 (0) 85 0491489
Email: nederland@de-soutter.com

USA

De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A, Mooresville, NC 28117
Tel: +1 (704) 655 9040 Fax: +1 (704) 987 2035
Email: usa@de-soutter.com

www.de-soutter.com

120-D-7